


■ APPARECCHIO DI DISTILLAZIONE PER CIANURO

STEROGLASS VETRO LAB.

3550

Disegnato per convertire cianuri semplici o complessi in HCN ed isolare il cianuro prima di effettuare analisi colorimetriche.

Costituito da una beuta di Claisen da 500 ml con raccordo NS 29/32 (sono disponibili a richiesta coni di altre dimensioni), refrigerante di Allihn, tubo di connessione e tubo a gomito, bottiglia lavaggio gas con spirale da 270 ml, rubinetto e beuta da vuoto.

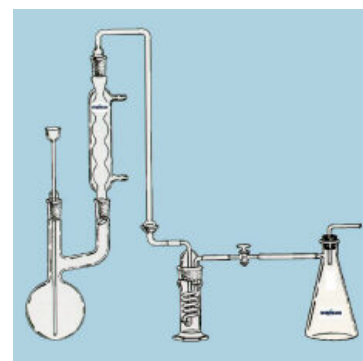

Codice	Codice	Descrizione
Steroglass	Fornitore	
SQUA033978		Apparato completo