


## ■ APPARECCHIO DI DISTILLAZIONE

### STEROGLASS VETRO LAB.

3555

Percorso breve, incamiciato, per distillare piccole quantità con elevata accuratezza. Il termometro sensibile, bulbo ottimizzato. Il distillato condensa direttamente nei palloni di raccolta. Le connessioni superiori sono per linee d'acqua, quelle inferiori per linee da vuoto. Raccordi NS 14/23 (sono disponibili a richiesta coni di altre dimensioni). E' possibile utilizzare un termometro al posto del tubo per immissione gas.

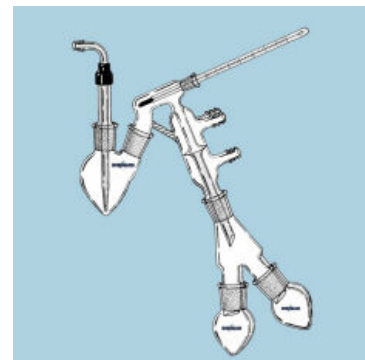

Codice	Codice	Descrizione
Steroglass	Fornitore	
SQUA026193		Apparato completo