

## ■ AGITATORE A PIATTO ROTANTE PER PROVETTE - MOD. 712

4932

### ASAL

Particolarmente adatto per rendere e mantenere omogenei campioni di sangue e sospensioni cellulari, è dotato di disco rotante con inclinazione a 57° o 63°.


Il disco è munito di frizione che permette l'inserimento o l'espulsione di provette senza fermare l'apparecchio. Rotazione costante. Costruzione esterna in acciaio con verniciatura antiacida in polvere. Con interruttore generale e spia luminosa di accensione.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Dimensione disco diam.mm. 240.
- Fusibili di protezione 2 x 0,50 A (5x20) mm.
- Presa collegamento rete 10 A.
- Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz.
- Assorbimento 10 W.
- Dimensioni d'ingombro mm. 300x280x300 h.
- Peso netto Kg. 6.
- Imballo scatola dim.mm. 570x350x260 h.
- Peso lordo Kg. 9.

Fornibile, su richiesta, con velocità regolabile.

(r. 120308)

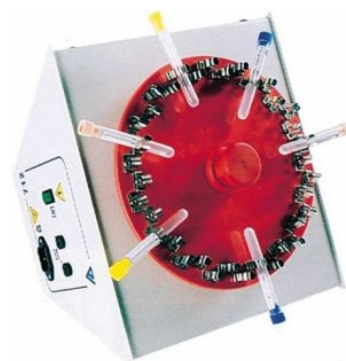

Codice	Codice	Modello
Steroglass Fornitore		
AAAI037794	29970001	Agitatore rotante per provette mod. 712