

■ Reattori pilota Easychem 10, 15, 20, 30L

STEROGLASS

Versione full optional

Sistema di reazione completo su struttura tubolare in AISI free standing con telaio mobile.
Design da laboratorio, sistema di agitazione e connessioni ad alte prestazioni.

- "Sicurezza totale: nessun residuo o liquidi stagnanti;
- "Conforme alla FDA (PTFE e vetro borosilicato a contatto con i prodotti);
- "Multiuso;
- "Tubazioni in PTFE;
- "Design compatto (può essere posizionato sotto cappa (H 1900 mm)).

RECIPIENTE DI REAZIONE

- Sistema di caricamento rapido;
- Vetro trasparente per facilitare il controllo visivo durante la reazione;
- Recipiente incamiciato e facilmente collegabile al chiller;
- Eccellente controllo della temperatura di reazione;
- Agitazione liquida omogenea;
- Il coperchio più grande consente la presenza di più bocchelli, aumentando il potenziale controllo della reazione.

SISTEMA DI AGITAZIONE:

- Può funzionare per giorni senza danni;
- Sistema di lunga durata senza rotture dovute a turbolenze per l'agitazione di liquidi viscosi
- Può essere facilmente assemblato
- Facile da pulire

RECIPIENTI DI COLAGGIO GRADUATI

- "Adattatore NS29 con GL18 per tubo PTFE 12x10
- "Recipienti in vetro da 2L / 5L
- "Bloccaggio al telaio
- "Rubinetti Rotaflotm 10mm per alimentazione e rottura vuoto
- "Collegamento delle tubazioni al tubo di immersione e al coperchio mediante tubi in PTFE.

Recipienti di colaggio graduati da 500 ml e 1000 ml, con o senza opzione di livellamento:

- Curva vetro NS29 / 32
- Separatore cilindrico con rubinetto in PTFE;
- Morsetto al telaio

MOTORE ELETTRICO

KIT LETTURA pH
KIT LETTURA Pt 100

SALITA VAPORI


- "Curva 45 ° NSM45;
- "Testa di riflusso compatta con rubinetto Rotaflotm D10mm per vapori condensati;
- "Condensatore a serpentina verticale da 0,12 a 0,4m2, portagomma 8mm;
- "Raccordo portagomma D12mm per fumi.

VALVOLA INFERIORE STANDARD VB 50/25

- "Robusta e rimovibile
- "La valvola non si blocca ed è facile da pulire
- "In caso di rottura può essere sostituita senza dover cambiare l'intero reattore
- "Sicurezza totale: nessun residuo o liquido stagnante
- "Per uso farmaceutico
- "Multiuso

(r.200421)

5940

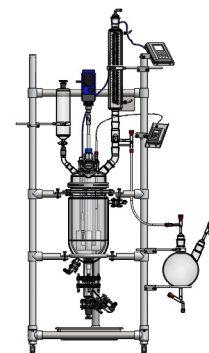

Codice	Codice	Volume	DN	Cod Motore	Modello
Steroglass Fornitore					
SQHK083717	KC35722	15L	DN300	SQA0080339	ST-1800DF
SQHK083716	KC35719	15L	DN200	SQA0080339	ST-1800DF

SQHK083686	20L	DN200	SQA0080339	ST-1800DF
SQHK083687	20L	DN300	SQA0080339	ST-1800DF
SQHK083688	30L	DN300	SQA0080339	ST-1800DF
SQHK083685	10L	DN300	SQA0080339	ST-1800DF
SQHK083684	10L	DN200	SQA0080339	ST-1800DF